

操作说明书（恒温恒湿程序指示控制器）



WELCOME

Thank you for purchasing furnace controller production.
Please use after read instruction manual for safety.
Free to contact to our sales Div. for
production inquiry and after service.



Various





目录

1. 操作及设定

1-1 基本运行流程图	4
1-2 设定按钮操作	5
1-3 参数设定方法	6

2. 主页画面

9

3. 运行状态画面设定

3-1 定值运行	13
3-2 程式运行	20
3-3 自动演算和演算点	29

4. 运行动作设定

4-1 运行方式设定	31
4-2 模糊 (FUZZY) 控制	33
4-3 设定值变斜率 (SLOPE) 动作	34

5. 预约运行设定

36

6. 曲线图表示及保存设定

6-1 表示程式曲线图	41
6-2 查看指示值 (PV) 曲线图	44
6-3 指示值 (PV) 曲线图保存设定	47
6-4 SD存储保存设定	48

7. 程式设定

7-1 程序程式设定	52
7-2 程式循环设定	57
7-3 编辑文件	58
7-4 时间信息动作	61
7-5 等待动作	64
7-6 实验名称设定	66

8. 画面显示设定

8-1 画面显示设定	69
8-2 查看DI故障历史记录	71

9. 通讯错误

74

Part 01

操作及设定

1-1 基本运行流程图	4
1-2 设定按钮操作	5
1-3 参数设定方法	6




01. 操作及设定

本产品是便于用户使用的触摸屏方式的对话式画面设计的恒温恒湿程序控制器。

1-1. 基本运行流程图


- 最初的产品安装结束后，开启 (ON) 电源、LOGO画面和初始画面顺次表示后、转换为程式停止画面。
- 画面加载时约消耗20秒。
- 按程式停止画面右侧上端的 **目錄** 键、便可转换为主页画面。
- 初始画面的变更请参照[安装说明书]的[12. 系统初始设定]。

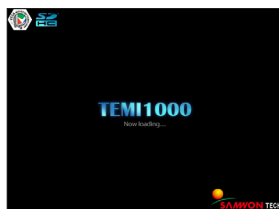

LOGO画面



初始画面

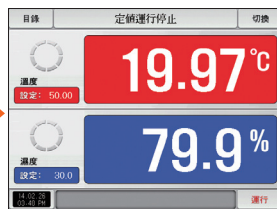

定值运行停止画面(TEMI1500)



程式停止画面(TEMI1500)





定值运行停止画面(TEMI1300/1900 宽银幕)




程式停止画面(TEMI1300/1900 宽银幕)

1-2. 设定按钮操作

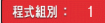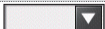按钮种类	按钮操作
 	在定值运行/停止画面中、按“设定值”部分、用户需要设定设定值时使用。
	在程式停止画面中、按“程式号码”部分、用户需要设定程式号码时使用。
	使用于输入一般数据或名称。
	在多数种类中选一个项时使用。
	2~3个参数的设定中选一项时使用 (ON状态 / OFF状态 / 非活性状态)
	选择该参数的使用有无时使用 (ON状态 / OFF状态 / 非活性状态)
	使用于一般的画面转换上。
	用于同一画面上的页面增加或减少。
	同一画面上，通过增加或减少时间轴来转换页面。


1-3. 参数设定方法

- [1-2 设定按钮操作] 中选择 键、会出现如下设定值输入键、可以输入需要的数值。
- 输入超出设定范围的数值、发出错误音（“哔哔”）的同时，输入值显示窗口会显示错误信息（“LIMIT ERROR”）。

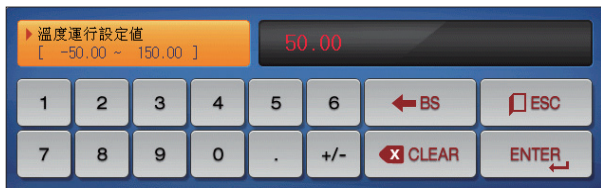


▲ 只能设定数字的输入键

为了设定程式试验名称及DI故障名称的输入键 ▶
DI故障名称输入键请参照[安装说明书]的
[11. DI功能及操作设定]。

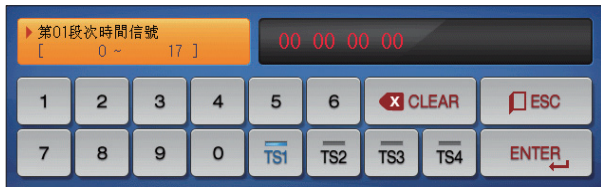

▲ 设定时间信号的输入键

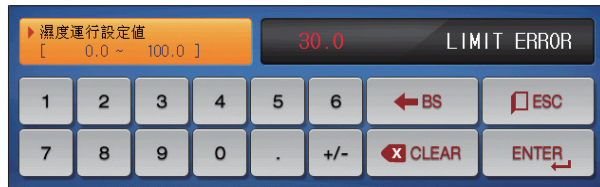

▲ 超出设定范围时的表示



解除触摸键锁定(KEY LOCK)

- “按键锁定”为“ON(锁定状态)”时、不能输入设定值、应将“按键锁定”变更为OFF(解除锁定状态)”后输入。
- 详细的设定方法请参照[4. 运行状态画面设定]。

(1) 对于设定按钮及设定值的有效方法

- 本产品可用声音确认按设定值输入键或者被输入设定值的有效性与否、设计为如下。
- “哔”：按基本设定键和正确输入设定值时
- “哔哔哔”：通过设定值输入键输入的值超出输入范围时
- 按基本设定键及设定值输入键时、不要用锐利的物体(铅笔等)或者用力按。
会成为机器误动作或触摸板的破损等原因。

(2) 设定值输入方法

- 本产品使用的所有输入值，通过设定值输入键、测试名输入键及时间信号输入键来设定。
- 设定值输入键在[1-2设定按钮操作]中按  键就会出现、也可输入要设定的值。
- 时间信号输入键请参照[7-4时间信号动作]。
- DI故障名称输入键请参照[安装说明书]的[11. DI 功能及操作设定]。



例) 设定值输入方法

在该画面中按设定值输入按钮。→ 按照顺序摁有关数字
(a)→(b)→(c)→(d)→(e)后、最后按“ENTER”键(①)。

①	表示“参数”
②	表示“设定范围”
	表示“设定值表示窗”
③	● 超出设定范围时、会显示“LIMIT ERROR” ● 设定单位错误时、会显示“INPUT ERROR”
④	停止输入、恢复到原来画面时使用
⑤	保存输入值、恢复到原来画面
⑥	输入小数点时使用
⑦	输入符号 (+/-) 时使用
⑧	删除每一个输入值时使用
⑨	删除所有输入值时使用
⑩	显示原来输入的设定值

Part 02

主页画面	9
------	--------



02. 主页画面

[图 2-1] 主页画面(TEMI1500)



号码	指示内容	内容说明
①	运行状态画面	移动到运行画面。
②	运行动作设定	移动到附加功能及运行方式设定画面。
③	预约运行设定	移动到现在时间及预约运行时刻设定画面。
④	曲线图&保存	移动到可以设定曲线图表示及曲线图记录、保存内部数据的画面。
⑤	程式设定	移动到程式设定菜单画面。
⑥	画面显示设定	移动到可以设定画面亮度调整及蜂鸣音使用有/无、背光灯节电、设置背景颜色、表示湿度的画面。

[图 2-2] 主页画面(TEMI1300/1900 宽银幕)



- | | |
|---|----------------------------------|
| ① | 表示当前日期/时间。 |
| ② | 表示当前温度指示值(PV)。 |
| ③ | 表示当前湿度指示值(PV)。 |
| ④ | 操作画面移动按钮。
• 操作过程中、按钮交替显示各种颜色。 |

参考事项

- ▶ 在TEMI1300/1900宽屏产品中、左侧显示值(PV)画面、都显示在参数左边。

Part 03


运行状态画面设定

3-1 定值运行	13
3-2 程式运行	20
3-3 自动演算和演算点	29




切换


流程图

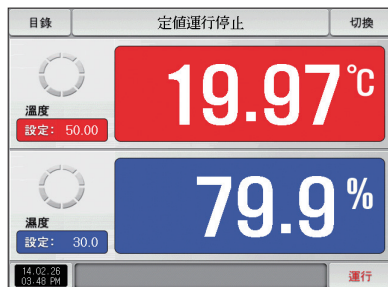


[图3-1]定值运行第一停止画面

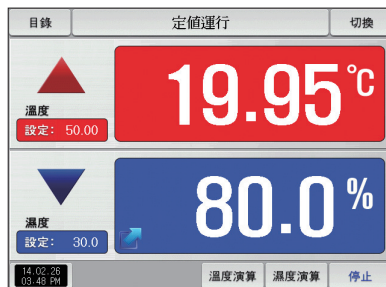

[图3-4]定值运行第一运行画面

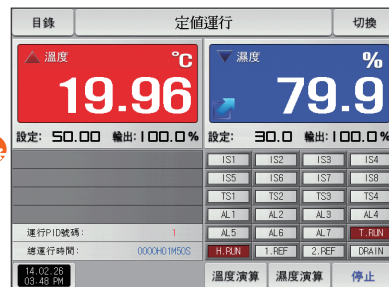

[图3-7]定值运行第二运行画面

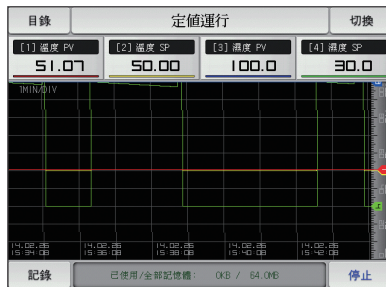

[图3-10]定值运行第三运行画面




03. 运行状态画面设定


3-1. 定值运行

(1) 定值运行第1停止画面

- [图2-1 主页画面]中选择运行状态、会转换为“定值运行第1停止画面”。
- [4. 运行动作设定]中运行方式选择为“定值”。
- 按[图3-1 定值运行第1停止画面]中右侧下端的 **運行** 键、会转换为[图3-5定值运行第1运行画面]。

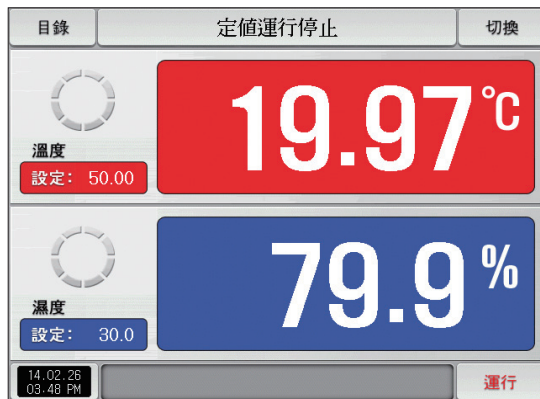

[图3-1]定值运行第1停止画面

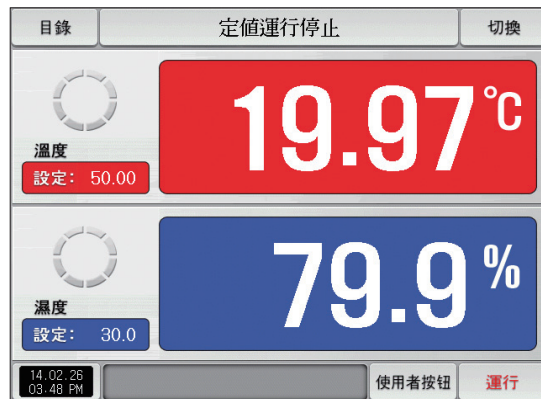

[图3-2]定值运行第1停止画面(用户按键)



[图3-3]要运行的温度设定值输入键画面



[图3-4]要运行的湿度设定值输入键画面

参数	设定范围	单位	初始值
温度设定值 (SP)	T. EU (0.00 ~ 100.00%)	T. EU	T. EU (0.00%)
湿度设定值 (SP)	H. EU (0.0 ~ 100.0%)	H. EU	H. EU (0.0%)

※ T.EU: 温度侧感应输入值范围

※ H.EU: 湿度侧感应输入值范围

※ 参照[工学单位]

参考事项

- ▶ 输入温度侧设定值的方法是按 **設定: 50.00** 键、
[图3-3要运行的温度设定值输入键画面]会被活性化。
- ▶ 输入湿度侧设定值的方法是按 **設定: 30.0** 键、
[图3-4要运行的湿度设定值输入键画面]会被活性化。
- ▶ 输入完温度・湿度设定值以后, 选择 **運行** 键、
执行定值运行。

(2) 定值运行第1运行画面

- 即使在运行中触摸“设定值”部分、要运行的目标值设定输入键会显示为活性化。
- 是表示测定值、设定值的画面。




参考事项


- ▶ ▲、▲：设定值 > 测定值、表示温度・湿度上升。
- ▶ ○、○：设定值 = 测定值、表示维持温度・湿度。
- ▶ ▼、▼：设定值 < 测定值、表示温度・湿度下降。

- | | |
|---|--|
| ① | 表示要控制的温度设定值 (SP)。 |
| ② | 表示当前温度指示值 (PV)。 |
| ③ | 表示当前湿度指示值 (PV)。 |
| ④ | 表示要控制的湿度设定值 (SP)。 |
| ⑤ | 表示当前日期/时间、按此处的话、LCD背光灯会熄灭。
• 在停止状态下、背光灯熄灭的话、右侧上端的LED红色灯会亮。 |
| ⑥ | 移动到[图 2-1主页面]。
• 主键制约设定时、显示可输入密码的键盘。
• 请参照[图 4-2主键制约设定时画面] |
| ⑦ | 从当前画面移动到下一页画面。 |
| ⑧ | 用当前温度设定值 (SP) 执行或者解除自动演算。
• 在[安装说明书]的[8. PID组合]中、设定演算键的表示有/无。 |
| ⑨ | 用当前湿度设定值 (SP) 执行或者解除自动演算。
• 在[安装说明书]的[8. PID组合]中、设定演算键的表示有/无。 |
| ⑩ | 定值运行/停止按钮 |
| ⑪ | 在运行画面点击此处可扩大表示当前指示值的窗口。
• 请参照[图3-8 定值运行第1运行扩大画面] |

(3) 定值运行第1画面 (TEMI1300/1900 宽银幕)

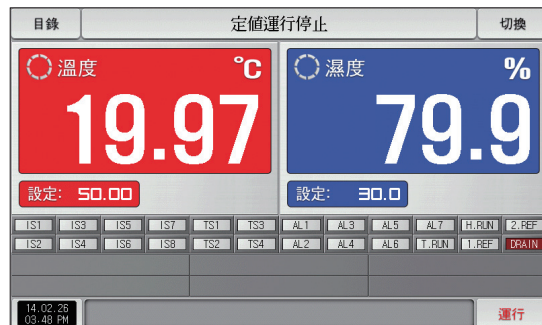


[图3-6]定值运行第1停止画面

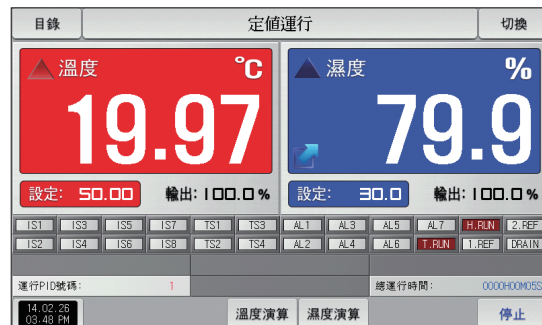

[图3-7]定值运行第1运行画面

(3) 定值运行第二运行画面


- 表示测定值、设定值、输出量及状态表示灯的画面。

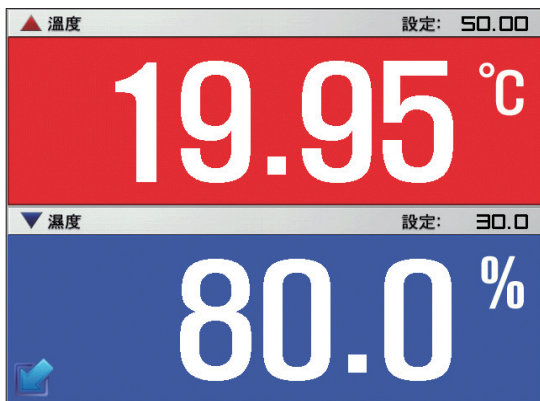

[图3-8] 定值运行第1运行扩大画面

- ① 表示状态灯、“ON”状态表示为红色、“OFF”状态表示为深灰色。
- 在[安装说明书]的[12. 系统初始设定]中设定状态灯。
 - 在[12. 系统初始设定]中状态灯可设定到24个。

- ② 表示温度的控制输出量(MV)

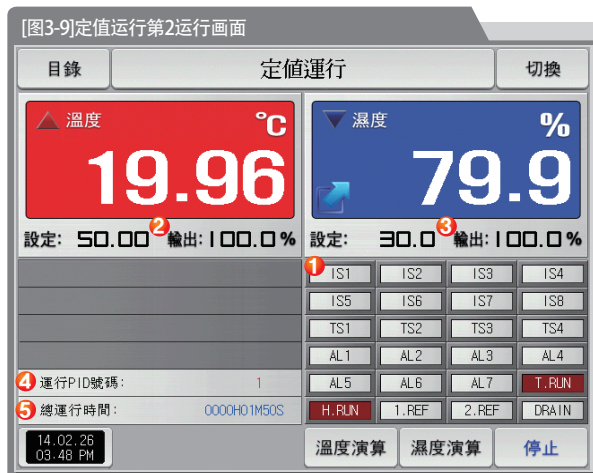

- ③ 表示湿度的控制输出量(MV)


- ④ 表示当前适用的PID组合的号码。

- 在[安装说明书]的[8. PID组合]中、也可以确认到被适用的PID组合。

- ⑤ 表示定值运行的全部进行时间。

(5) 定值运行第3运行画面

- 画面的上端部分表示温度、湿度的测定值、设定值，曲线图方向以横向表示。
- () 复选框设定数据的表示有无。
- 要将记录中的数据保存到内部存储器里，请按  键。
- 电源ON/OFF时，保存在内部存储器里的数据将自动保存。
- 请参照[6-2 指示值 (PV) 曲线图查看]。

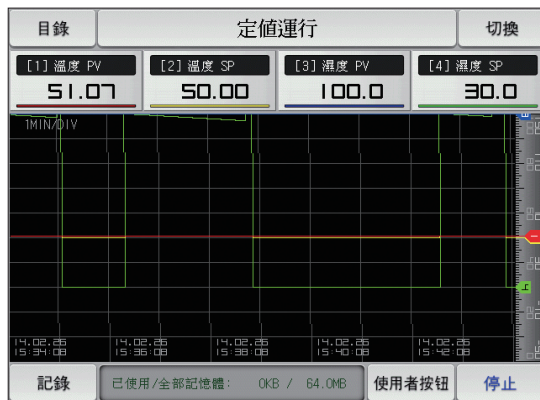


[图3-11]定值运行第3运行画面(用户按钮)

- ① 表示当前运行中的温度・湿度的测定值、设定值。
- ② 表示内部存储器的容量。
 - 抽样时间为一秒时、大约可以保存90天。
- ③ 将当前记录中的温度・湿度的测定值、设定值，保存到内部存储器的按钮。

(6) 定值时间设定运行结束画面

- [4. 运行动作设定]中, 经过设定时间停止运行时, 就如以下画面显示“定时定值运行終了”
消息, 定值运行也将同时结束。
- 运行中按“停止”键、强制结束的话、消息不会显示在画面上。
- 结束运行时、显示运行结束的消息的话、触摸该部分、消息就会消失(程式运行结束时也一样)。

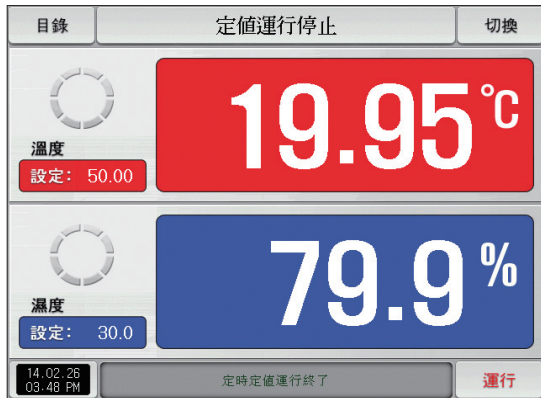


[图3-12] 定值时间设定运行结束画面


3-2. 程式运行

(1) 程式运行第1停止画面

- [图2-1主页面]上选择运行状态画面、会转换为“程式运行第1停止画面”。
- 在[4. 运行动作设定]中，运行方式选择为“程式”。
- 程式设定方法请参照[7-1程序程式设定]。
- 在[图3-13 程式运行第1停止画面]中按右侧下端的 **運行** 键、会转换为[图3-16 程式运行第1运行画面]

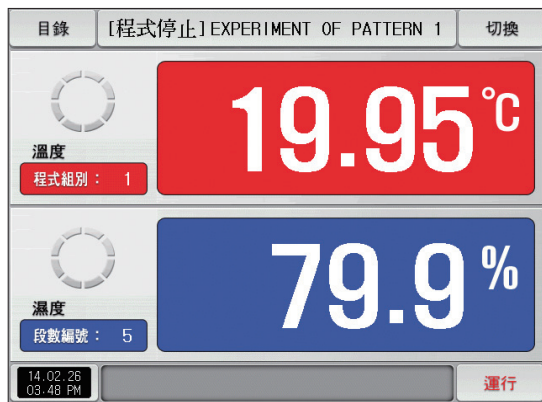

[图3-13]程式运行第1停止画面

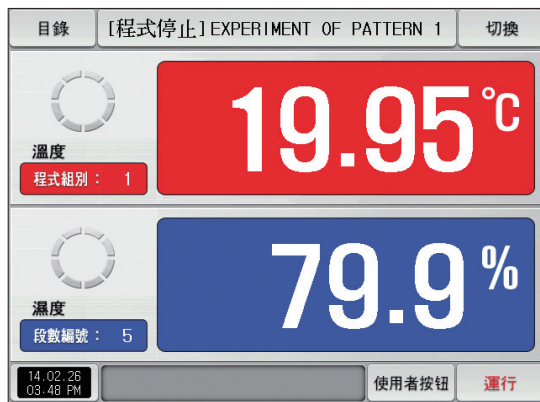

[图3-14]程式运行第1停止画面(用户按键)



[图3-15]要运行的程式号码设定输入键画面

参考事项

- ▶ 输入要运行的程式号码设定值的方法是按 **程式組別: 1** 键、如[图3-15 要运行的程式号码设定输入键画面]就会活性化。
- ▶ 输入完要运行的程式号码设定值以后, 选择 **▶ 运行** 键、执行程式运行。

参数	设定范围	单位	初始值
程式号码	1 ~ 120	ABS	1




操作时的注意事项

- 如果画面上表示的程式号码上没有输入程式、运行就不能执行。
- 请参照[7-1程序程式设定]。

(2) 程式运行第1运行画面

- 运行中不能设定程式号码。
- 是表示测定值、设定值的画面。

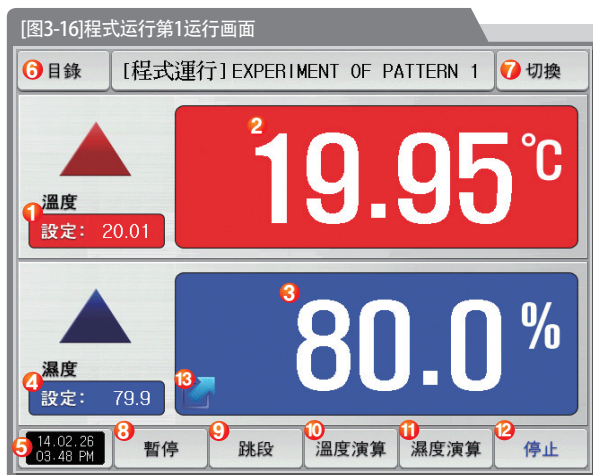


参考事項


- ▶ 表示当前程式进行方向。
- ▶ ▲、△：表示设定值变化上升时。
- ▶ ○、□：表示设定值变化维持时。
- ▶ ▼、▽：表示设定值变化下降时。

- | | |
|---|--|
| ① | 表示要控制的温度设定值 (SP)。 |
| ② | 表示当前温度指示值 (PV)。 |
| ③ | 表示当前湿度指示值 (PV)。 |
| ④ | 表示要控制的湿度设定值 (SP)。 |
| ⑤ | 表示当前日期/时间、按此处的话、LCD背光灯会熄灭。
• 在停止状态下、背光灯熄灭的话、右侧上端的LED红色灯会亮。 |
| ⑥ | 移动到[图 2-1主页画面]。
• 主键制约设定时、显示可输入密码的键盘。
• 请参照[图 4-2主键制约设定画面] |
| ⑦ | 从当前画面移动到下一页画面。 |
| ⑧ | 维持 (HOLD ON) 或者解除 (HOLD OFF) 当前进行中的温度・湿度的设定值。 |
| ⑨ | 结束当前进行中的段、强制移动到下一个段。 |
| ⑩ | 用当前温度设定值 (SP) 执行或者解除自动演算。
• 在[安装说明书]的[8. PID组合]中、设定演算键的表示有/无。 |
| ⑪ | 用当前湿度设定值 (SP) 执行或者解除自动演算。
• 在[安装说明书]的[8. PID组合]中、设定演算键的表示有/无。 |
| ⑫ | 程式运行/停止按钮
在运行画面点击此处可扩大表示当前指示值的窗口。 |
| ⑬ | 请参照[图3-19 程式运行第1运行扩大画面] |

(3) 程式运行第1画面 (TEMI1300/1900 宽银幕)

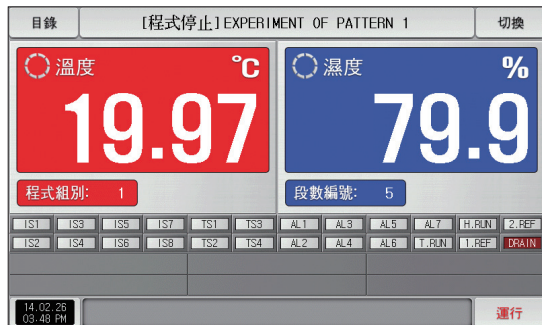


[图3-17]程式运行第1画面

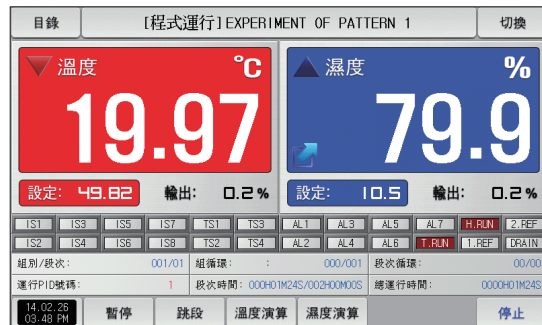

[图3-18]程式运行第1运行画面

(4) 程式运行第2运行画面

- 表示测定值、设定值、输出量及灯的动作状态的画面。

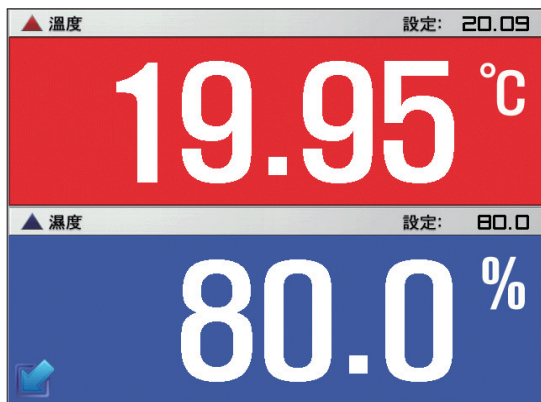

[图3-19] 程式运行第1运行扩大画面

表示状态灯、“ON”状态表示为红色、“OFF”状态表示为深灰色。

- 在[安装说明书]的[12. 系统初始设定]中设定状态灯。
- 在[12. 系统初始设定]中状态灯可设定到24个。


表示温度的控制输出量(MV)

表示湿度的控制输出量(MV)

表示当前运行中的程序程式号码和段号码。

表示程式循环状态。

- 组循环: 000/001 前面的数字表示循环的进行次数、后面的数字表示被设定的循环次数。

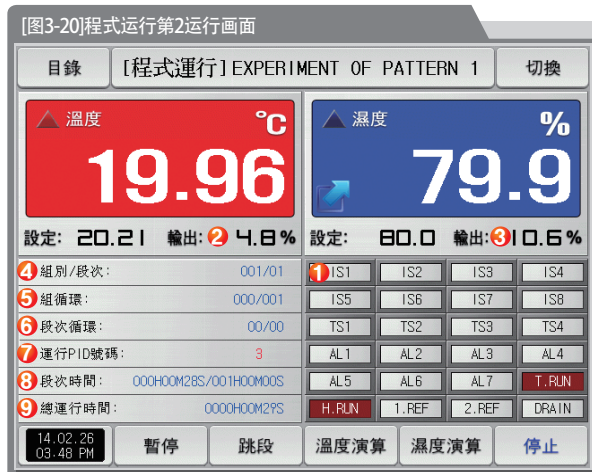

表示部分循环状态。

- 段次循环: 00/00 前面的数字表示循环的进行次数、后面的数字表示被设定的循环次数。

表示当前适用的PID组合的号码。



- 在[安装说明书]的[8. PID组合]中、也可以确认到被适用的PID组合。
- 表示当前进行中的段进行时间和设定时间。

- 段次時間: 000H00M28S/001H00M00S 前面的时间表示段进行时间、后面的时间在[7-1程序程式设定]中表示被设定的时间。

表示程式运行的全部进行时间。

(5) 程式运行第3运行画面

- 画面的上端部分表示温度、湿度的测定值、设定值，曲线图方向以横向表示。
- () 复选框设定数据的表示有无。
- 要将记录中的数据保存到内部存储器里，请按  键。
- 电源ON/OFF时，保存在内部存储器里的数据将自动保存。
- 请参照[6-2 指示值(PV)曲线图查看]。

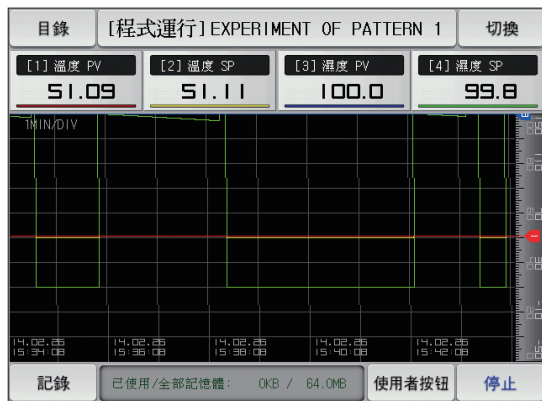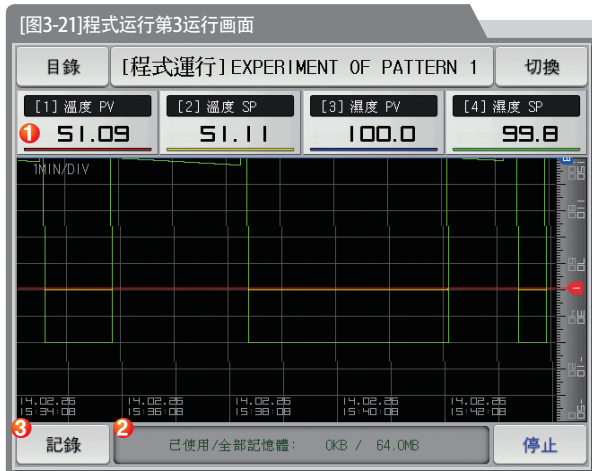


[图3-22]程式运行第3运行画面(用户按钮)

- ① 表示当前运行中的温度・湿度的测定值、设定值。
- ② 表示内部存储器的容量。
 - 抽样时间为一秒时、大约可以保存90天。
- ③ 将当前记录中的温度・湿度的测定值、设定值，保存到内部存储器的按钮。

(6) 程式运行结束画面


- 保存在组里的所有段的设定区间停止运行时，就如以下画面显示“程式组运行終了”消息，程式运行也将同时结束。
- 运行中按“停止”键、强制结束的话、消息不会显示在画面上。
- 结束运行时、显示运行结束的消息的话、触摸该部分、消息就会消失(定值时间设定运行结束时也一样)。

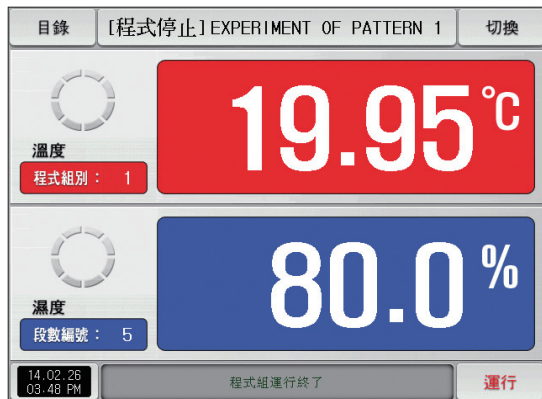

[图3-23 程式运行结束画面]

(7) 其他运行画面


- 在运行画面表示警告的画面。

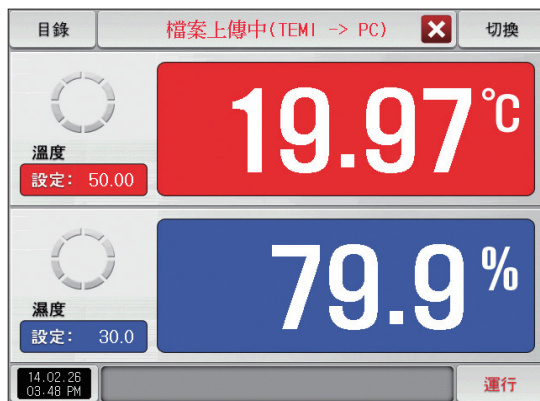

[图3-24] 传送已保存的PV文件的画面

参考事项


- ▶ 把已保存到内部存储器里的PV文件传送至PC的画面。
传送 0.1M byte时大约需要23秒。

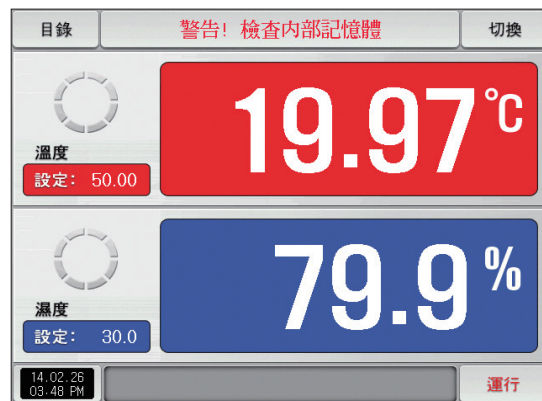

[图3-25] 内存容量不足时出现的警示画面

参考事项

- ▶ 内部存储器容量达到60.8M byte时出现的画面。

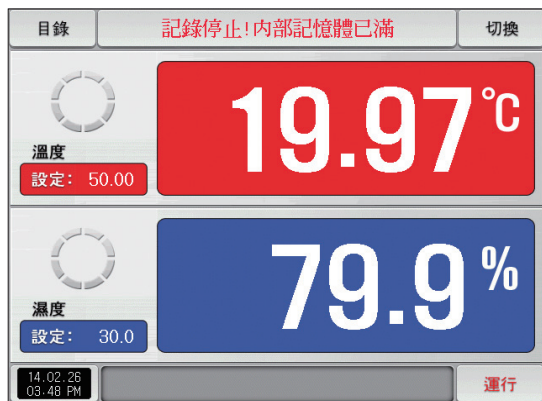


[图3-26]内存空间已满时出现的警示画面

参考事项


- ▶ 内存空间已满时出现的画面。

参考事项

- ▶ [图3-27] 是内部存储器里储存的文件数超过240件时出现的画面。
- ▶ [图3-28] 是内部存储器里储存的文件数达到256件(空间已满)时出现的画面。

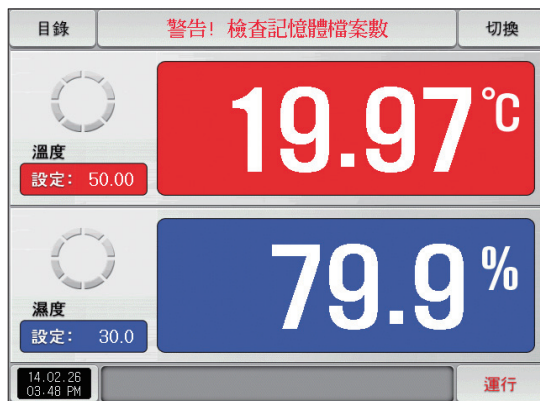


[图3-27]储存文件数量不足时出现的警示画面

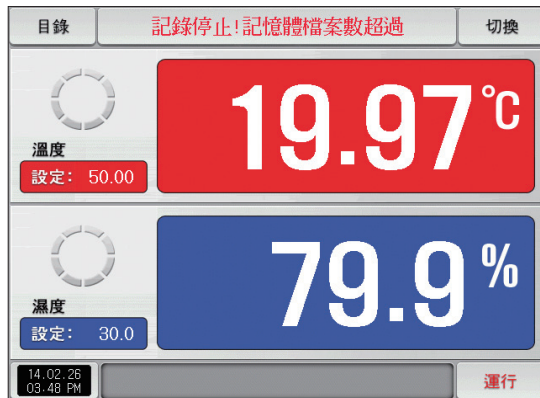

[图3-28]储存文件数已满时出现的警示画面

3-3. 自动演算和演算点

- 程式运行时段会维持，结束自动演算时段会进行下去。
- 自动演算是控制器测定、计算控制对象的特性、自动设定最合适的PID参数的功能。
- 自动演算时控制器在“2.5周期”之间产生ON/OFF控制输出、这时对控制对象使用限制循环方式、按其周期和振幅自动计算出P、I、D值。
- 在程式・定值运行中都可进行自动演算。也可在当前设定值自动演算，将计算出来的P、I、D值自动保存到设定值所处的PID组中。

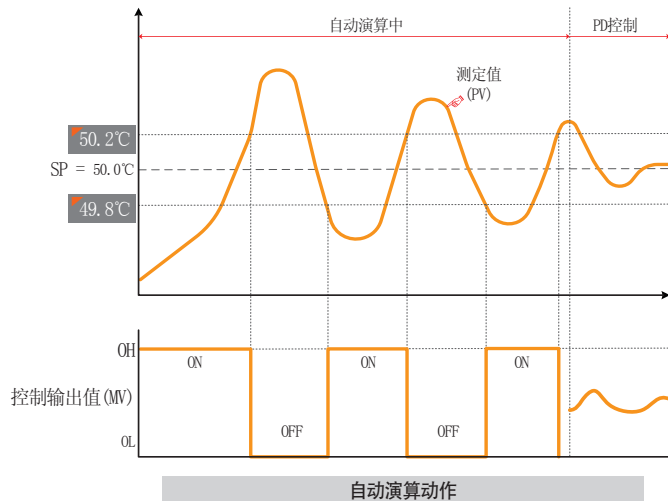

操作时的注意事项

- 自动演算时、变更当前设定值 (SP)、演算点也不会变。还有、结束自动演算后、把变更的当前设定值 (SP) 为目标设定值 (TSP)、开始控制。
- 自动演算时、输入上发生“感应断线”时、自动演算会被中断。这时、P、I、D值维持以前的设定值。
- 自动演算经过27小时、中断自动演算。
- 自动演算时可以变更P、I、D设定值、但是根据自动演算时计算求出的P、I、D值会被重新设定。
- 强制结束自动演算时、P、I、D值维持自动演算之前的设定值。
- 自动演算时，以设定温度稳定下来之后，先自动演算温度侧。然后等温度稳定下来以后，自动演算湿度侧，就会得出更准确的P、I、D值。

参考事项

▶ 按照设定值的自动演算动作 举例

- 运行方式：定值运行/输入感应：温度 (PT_1)
- 温度自动演算点：0.10% → EUS 0.10% = 0.2°C

- 范围：-50.00°C ~ 150.00°C
- 当前设定值 (SP)：50.0°C

- 输出下限 (OL)：0.0%/输出上限 (OH)：100.0%

50.2°C 49.8°C：自动演算点

Part 04

运行动作设定

4-1 运行方式设定	31
4-2 模糊(FUZZY)控制	33
4-3 设定值变斜率(SLOPE)动作	34



04. 运行动作设定

是关于一般的附加功能和定值运行时追加设定的画面。

4-1. 运行方式设定

- 在[图2-1主页面]中选择运行动作设定、会转换为“有关运行动作设定画面”。

[图4-1]有关运行动作设定画面

目錄 功能和定值操作

1 操作模式
☒ 程式 ☐ 定值

2 斷電模式
☒ 停止 ☐ 冷啟動 ☐ 熱啟動

3 模糊控制選擇
☒ 不動作 ☐ 動作

4 設定值斜率
 溫度斜率 °C/M
 濕度斜率 %/M

5 定時操作
☒ 不使用 ☐ 使用
 小時 H
 分鐘 M

6 限定目錄按鍵
☒ 不使用 ☐ 使用
 使用者密碼

7 按鍵鎖定

运行模式在程式及定值运动中选择一项来设定。
(运行中不能变更)

- ①
- 程 式：程式运行时设定
 - 定 值：定值运行时设定

停电时设定复原动作。

- 停 止：在运行状态中停电后、停电恢复时复原到运行停止状态的动作。

- ②
- 重新开始：在运行状态中停电后、停电恢复时从头开始的动作。
 - 继 续：在运行状态中停电后、停电恢复时复原到停电以前的运行状态的动作。

外乱发生时安定化控制。

- ③
- 未动作：发生过冲、随着时间的经过、指示值会安定化。
 - 动 作：有抑制过冲功能，比未动作时更快安定化

设定值变更时、按设定的比率自动增加或者减少。

- ④
- 只适用于定值运行。

设定的时间和 [3-1 (4) 定值运行第2运行画面] 中的全部运行进行时间一致时，运行就会结束。

- ⑤
- 只能在定值运行中使用。

⑥	主键制约设定时、在运行画面按主键，就会显示可输入密码的键盘。 • 请参照[图 4-2主键制约设定时画面]。
⑦	按 按键锁定 键、所有参数都不能设定。 • 可以移动画面和解除锁定。

停电时复原动作	程式运行	定值运行
停止	程式停止	停止
重新开始	从第一个段开始运行	运行
继续	从停电前的运行段开始运行	运行



参数	设定范围	单位	初始值
运行方式	程式、定值	ABS	程式
停电时复原动作	定值、重新开始、继续	ABS	停止
模糊 (FUZZY) 控制	未动作、动作	ABS	未动作
KEY LOCK	OFF、ON	ABS	OFF
温度变斜率	T. EUS (0.00 ~ 100.00%) / MIN	T. EUS / MIN	T. EUS (0.00%) / MIN
湿度变斜率	H. EUS (0.0 ~ 100.0%) / MIN	H. EUS / MIN	H. EUS (0.0%) / MIN
时间设定运行	未使用、使用	ABS	未使用
时间	0 ~ 9999 HOUR	ABS	0
分	0 ~ 59 MIN	ABS	0



[图4-2]主键制约设定时画面


4.2. 模糊控制

- 一般运行时、负荷变动过大或者当前设定值(SP)经常变的话、可能发生过冲。
这时, 运行模糊控制的话, 可以有效执行控制。
- 模糊控制的内部动作顺序 : 从过冲调节时点开始、以辅助目标值(SUPER SP)代替当前设定值(SP)、计算出控制输出值(MV)、抑制过冲。

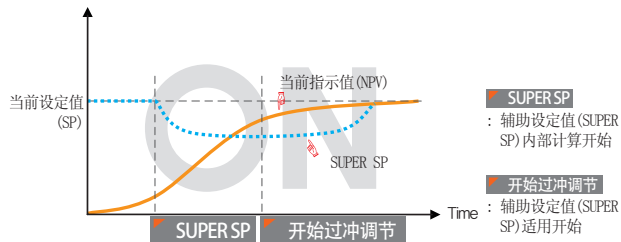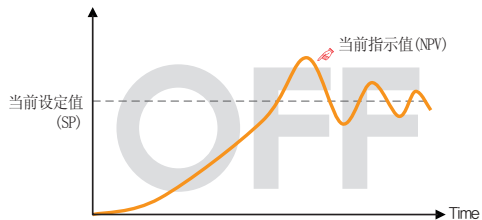

4.3. 设定值变斜率(SLOPE)动作

- 变更设定值 (SP) 的话, 会从当前指示值 (PV) 到设定值, 按一定的变斜率来变化设定值。

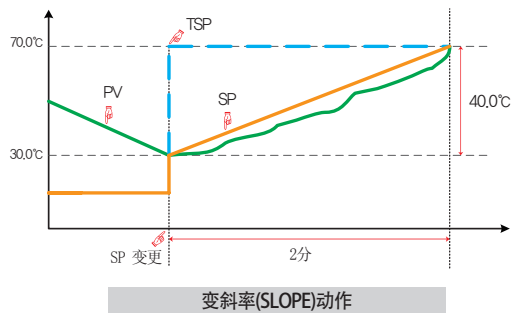

参考事项

- ▶ 运行方式：定值运行
- ▶ 温度变斜率：20.0 °C/分
- ▶ 将[变更的SP (TSP) - SP 变更时点上的 PV] 每分钟按20.0°C的倾斜率变化。
：将 $(70.0 - 30.0) ^\circ\text{C} = 40.0 ^\circ\text{C}$ 每分钟按20.0°C的倾斜率变化。
- ▶ 2分钟之内、以相同的变斜率, 将当前设定值(SP)从30.0°C增加到70.0°C。

Part 05

预约运行设定36




05. 预约运行设定

- [图2-1主页画面]中按预约设定按钮、转换为[图5-1时间设定画面]。
- 是可以设定现在时刻及预约运行时刻的画面。


[图5-1] 时间设定画面。

目錄		現在時間和預約啟動時間	
1 現在時間		2 預約啟動時間	
年	2014 Y	年	2014 Y
月	7 M	月	7 M
日	4 D	日	5 D
上午/下午	下午 ▼	上午/下午	下午 ▼
小時	1 H	小時	5 H
分鐘	24 M	分鐘	52 M
		3 預約	

- ① 设定现在年、月、日及时间。
 - 记录测定值及运行中，不能变更现在时间。
- ② 设定预约运行所必要的年、月、日及时间。
按 **預約** 键、可以在设定的预约时间内运行。
- ③ 按 **預約** 键、如图[图5-2运行预约设定画面]、运行画面上明示预约时间。

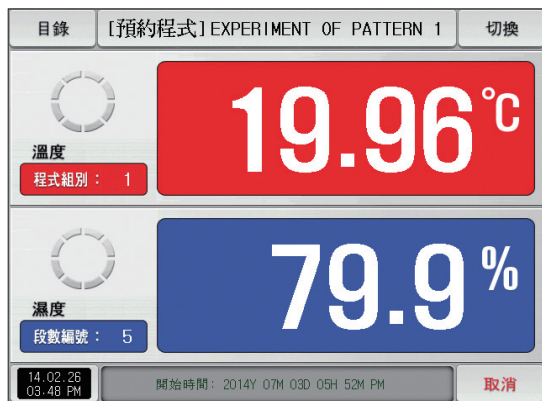

[图5-2]运行预约设定画面(程式运行)

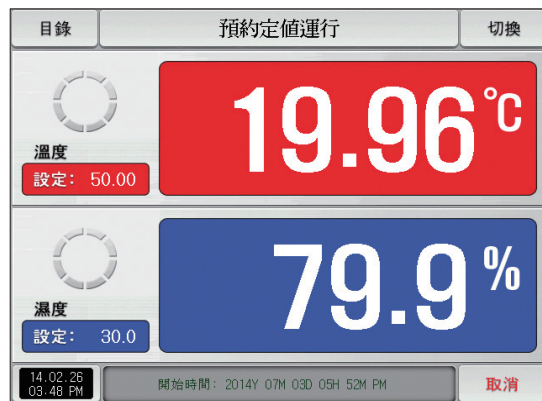

[图5-3]运行预约设定画面(定值运行)

参数		设定范围	单位	初始值
现在时刻	年	2000 ~ 2099	ABS	-
	月	1 ~ 12	ABS	-
	日	1 ~ 31	ABS	-
	上午/下午	上午/下午	ABS	-
	时间	1 ~ 12	ABS	-
	分	0 ~ 59	ABS	-
预约运行时刻	年	2000 ~ 2099	ABS	2014
	月	1 ~ 12	ABS	1
	日	1 ~ 31	ABS	1
	上午/下午	上午/下午	ABS	上午
	时间	1 ~ 12	ABS	12
	分	0 ~ 59	ABS	0
预约		预约时点击		

※ AM12:00:凌晨 00:00/PM12:00:下午 12:00

Part 06

曲线图表示及保存设定


6-1 程式曲线图表示	41
6-2 查看指示值(PV)曲线图	44
6-3 指示值(PV)曲线图保存设定	47
6-4 SD存储保存设定	48

曲线图表示及保存设定




切换

流程图

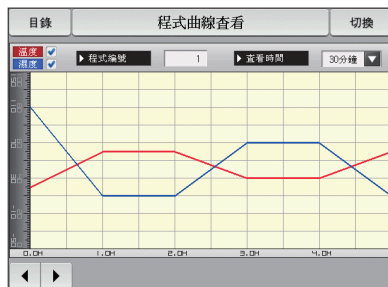

[图6-2]曲线图&保存第一画面

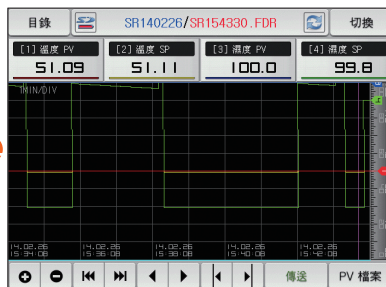

[图6-5]曲线图&保存设定第二画面
(选择曲线图表示)



[图6-9]曲线图&保存设定第三画面



[图6-10]曲线图&保存设定第四画面





06. 曲线图表示及保存设定

6-1. 程式曲线图表示

- 在[图2-1主页面]中, 选择[曲线图&保存]的话, 可转换为[图6-2 曲线图&保存第一画面]。
- 程式运行时、本画面把运行温度・湿度程式和进行时间表示成曲线图。
- [图7-2 程式编辑画面]中被输入的程式表示为曲线图的画面。
- 曲线图进行中可以变更温度・湿度的选择 ☒ 及 ☐ 程式編號 、 。



- ① 在当前进行中的曲线图中按被选择的 ☒ 键、曲线图画面中的温度(红色)会消失、重新按 ☐ 键、曲线图画面中表示出温度(红色)。

- 运行中也使用 ☒、☐ 键。

- ② 在当前进行中的曲线图中按被选择的 ☒ 键、曲线图画面中的湿度(蓝色)会消失、重新按 ☐ 键、曲线图画面中表示出湿度(蓝色)。

- 运行中也使用 ☒、☐ 键。

设定要表示的程式号码

- ③
- 按 键, 显示可设定程式号码的输入键。
 - 参照[图6-4程式号码输入画面]

设定曲线图X轴的时间


- ④
- 按 键, 显示可设定X轴时间的输入键。
 - 运行中也可以变更X轴时间。

- ⑤ 从当前画面移动到下一个画面。

- ⑥ 在当前页面按 键、变更到时间轴的上一页/下一页程式。

- ⑦ 可更改曲线的粗细。

[图6-3]曲线图&保存第一画面(程式运行)

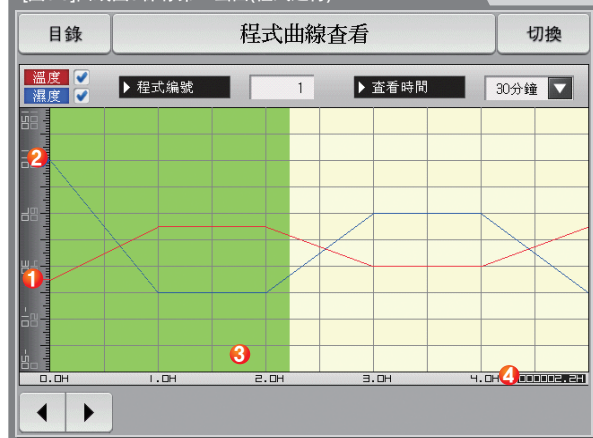

- ① 运行中表示当前温度。
- ② 运行中表示当前湿度。
- ③ 运行进行的部分表示为绿色。
- ④ 表示[7-1程序程式设定]的被设定程式的进行时间。



[图6-4]程式号码输入画面

参考事项

- ▶ 输入要用曲线图表示的程式号码的画面。
- ▶ 运行中也可以输入程式号码。

参数	设定范围	单位	初始值
程式号码	1~120	ABS	1
显示时间	30分钟、1个小时、3个小时、6个小时 12个小时、24个小时	ABS	30分钟

6-2. 查看指示值(PV) 曲线图

- 用曲线图表示[3-1(5) 定值运行第三运行画面] 及 [3-2(5) 程式运行第三运行画面]中记录的数据的画面。
- 记录的数据在一个页面的时候  、  功能就会失效
- 记录的数据少的时候搜索滚动栏就不会显示。
- 表示画面上端的内部存储保存的日期和时间。[参照1]



参考事项

- ▶  : 未插入SD卡或者不能辨认的时候表示的图表。
- ▶  : 表示内部储存容量的图表。(使用量在75%以下时)
- ▶  : 表示内部储存容量的图表。(使用量在75~90%时)
- ▶  : 表示内部储存容量的图表。(使用量在90% 以上时)

显示位于紫色基准线上的温度(设定值、显示值)及湿度(设定值、显示值)。

- ① 按被选的  键、会从曲线图画面消失、重新按  键、会显示于曲线图画面上。
- 请参照[图6-5、图6-6 曲线图&保存设定第二画面]。

② 把当前正在进行保存的曲线立即升级后表示的画面。

③ 从当前画面移动到下一页画面。

④ 表示位于紫色基准线上的温度。

- 可利用触摸屏及⑧ 按钮、移动到想要确认的点上。

⑤ 扩大或缩小时间轴。


⑥ 移动到被表示的PV曲线图页面的开始和最后。

⑦ 将曲线图画面一页一页地移动。

⑧ 可以每1DOT上/下移动曲线图画面上的紫色线。

- 触摸画面，蓝色线移动的同时，显示所指示的地方的值。

⑨ 点击画面下边的天蓝色部分、页面就会转移到点击的X坐标对应的地点。

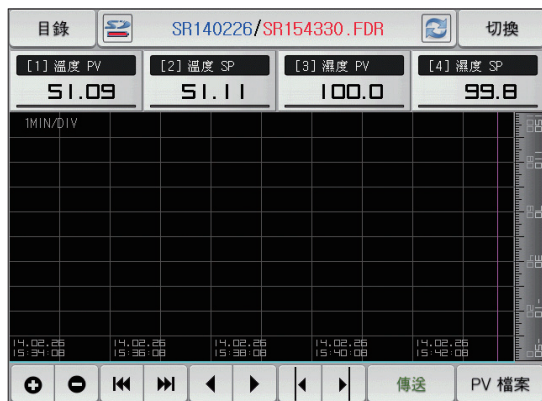

[图6-6]曲线图&保存设定第二画面(不选择曲线图表示)


参考事项

- ▶ 在温度(设定值、指示值)及湿度(设定值、指示值)项目中没有选择项目时的画面。
- ▶ 是为了显示内部存储保存的文件的画面。
- ▶ 内部存储保存请参照 [3-1(5) 定值运行第三运行画面] 及 [3-2(5) 程式运行第三运行画面]。

【图6-7】曲线图&保存设定第二画面(显示保存的文件夹)



【图6-8】曲线图&保存设定第二画面(显示保存的文件夹)

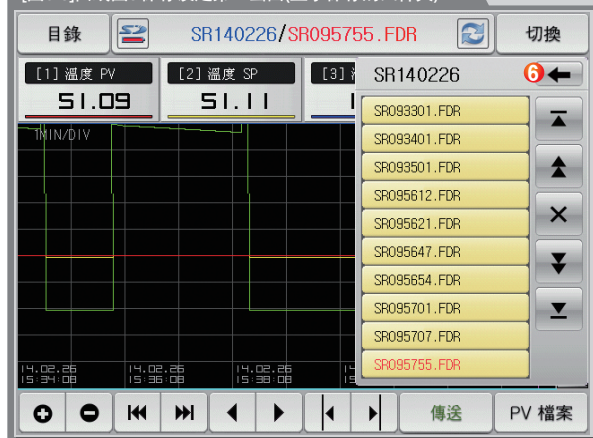

储存在内存卡里的文件中、被选择的 PV 文件、可复制成 SD 卡。

- ① 在沒有SD卡選項，或在運行畫面保存PV曲線圖時，因非活性化不能傳送。
- ② 按 **PV 檔案** 鍵、顯示內部儲存保存的文件。
• 當前打開的文件夹或者文件以紅色表示。
- ③ **▲ ▼** 搜索內部儲存保存的數據時、向始、末移動。
- ④ **▲ ▼** 搜索內部儲存保存的數據時、按10個單位上下移動。
- ⑤ **×** 關閉PV文件。
- ⑥ **←** 移動到文件夹。

6-3. 指示值(PV)曲线图保存设定

- 此画面是设定[3-1(5) 定值运行第三运行画面]及[3-2(5) 程式运行第三运行画面]中曲线图纪录时所需要的表示范围及抽样时间的画面。




- ① 设定PV曲线图保存周期
 - PV曲线图保存中不能变更
 - 内部存储保存时、抽样时间为一秒的话、可以保存约90天。
- ② 在内部存储设定数据保存有/无。
 - 自动：与运行/停止联动、自动保存数据。
 - 手动：通过运行第三画面里的保存键，以手动保存数据。
 - 电源ON/OFF时，内部存储器里存储的数据将自动保存。
- ③ 设定温度曲线图的表示范围。
- ④ 设定湿度曲线图的表示范围。

参数	设定范围	单位	初始值
保存周期	1秒、2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分	ABS	1秒
保存动作设定	自动、手动	ABS	自动
温度曲线图表示上限	T. EU(-2.50 ~ 102.50%)	T. EU	T. EU(100.00%)
温度曲线图表示下限	(温度 曲线图表示下限 < 温度 曲线图表示上限)	T. EU	T. EU(0.00%)
湿度曲线图表示上限	H. EU(0.0 ~ 100.0%)	H. EU	H. EU(100.0%)
湿度曲线图表示下限	(湿度 曲线图表示下限 < 湿度 曲线图 表示上限)	H. EU	H. EU(0.0%)

6-4. SD存储保存设定

- 设定往SD卡里传送程式及参数的画面。
- 只在SD卡选项中表示的画面。

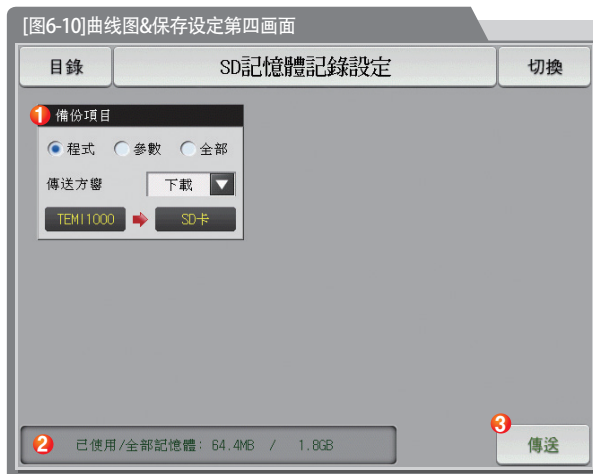

设定SD卡和TEM11000的传送项目及传送方向。

- 程 式：在[7-1程序程式设定]里，下载及上传被设定的程式。
- 参 数：下载或上传被设定的参数。
- ① 全 部：下载及上传程式及参数。
- 下 载：从TEM11000的内部数据中，被选的传送项目传送到SD卡中。
- 上 传：从SD卡里保存的数据中，被选的传送项目传送到TEM11000。

② 表示当前SD卡的容量

- 只在插入了SD卡时表示。

③ 不是用SD卡记录数据时、 键会被活性化、按  键的话、可以上传和下载。

参数	设定范围	单位	初始值
传送项目	程式、参数、全部	ABS	程式
传送方向	下载、上传	ABS	下载


Part 07

程式设定

7-1 程序程式设定	52
7-2 程式循环设定	57
7-3 编辑文件	58
7-4 时间信号动作	61
7-5 等待动作	64
7-6 实验名称设定	66



【图7-2】程式编辑画面

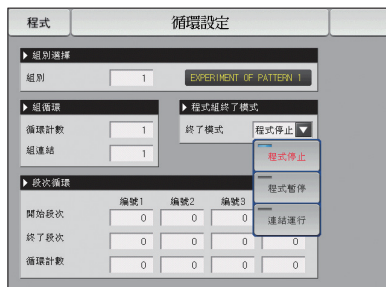


【图7-3】程式及段循环设定




【图7-4】文件编辑画面



【图7-7】时间信号设定#1

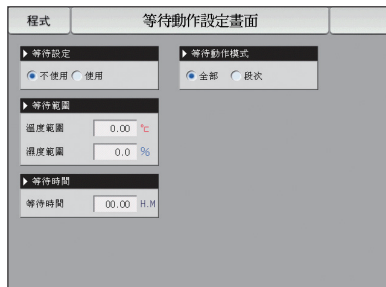

【图7-10】等待動作设定画面

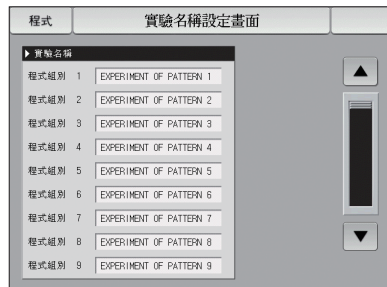

【图7-11】实验名称设定画面



07. 程式设定

- 在[图2-1主页画面]中，按程式设定按钮，会转换到[图7-1程式设定画面]。
- 是设定有关程式运行的参数的画面组合。

[图6-1]程式设定画面



- | | |
|---|-------------------|
| ① | 移动到程式编辑画面。 |
| ② | 移动到循环设定程式及段的画面。 |
| ③ | 移动到设定程式的复制及删除的画面。 |
| ④ | 移动到设定时间信号的画面。 |
| ⑤ | 移动到设定等待动作的画面。 |
| ⑥ | 移动到设定实验名称的画面。 |

7-1. 程序程式设定

- 按照程式序号设定段的画面。
- 时间信号的设定请参照[7-4时间信号动作]。
- 等待动作请参考[7-5等待动作]。

[图7-2]程式编辑画面

段次編號	段次01	段次02	段次03	段次04	段次05
3 溫度(°C)	60.00	60.00	30.00	30.00	60.00
4 濕度(%)	30.0	30.0	60.0	60.0	30.0
5 時間(H.M.S)	001.00.00	001.00.00	001.00.00	001.00.00	001.00.00
6 時間信號	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00
7 等待動作使用		☐	☐	☐	☐

① 输入要设定段的程式序号。

设定程式运行时的开始条件。

- 当前PV：程序开始运行时，当前设定值(SP)从当前指示值(PV)开始到段1(SEG1)里设定的当前设定值1(SP1)为止，在设定的时间内进行。
- 温度SSP：程序开始运行时，当前设定值(SP)从设定的温度SSP开始到段1(SEG1)上设定的当前设定值1(SP1)为止，在设定的时间(TM1)内进行。

②

- 湿度SSP：程序开始运行时，当前设定值(SP)从设定的湿度SSP开始到段1(SEG1)上设定的当前设定值1(SP1)为止，在设定的时间(TM1)内进行。

③

设定要运行的部分的温度设定值。

④

设定要运行的部分的湿度设定值。

⑤

设定要运行的段时间。

⑥

设定要运行的段时间信号。

- 每段可以设定4个时间信号、每个时间信号可在18种中选择设定。
- 请参照[7-4时间信号动作]。

⑦	选择要运行的段的等待动作的使用有/无。 • 请参考[7-5等待动作]
⑧	插入段时、 (段01 ~ 99) 按钮中选择后按的话、  (段01 ~ 99) 被选的按钮和  键就可以使用。 按  键、就可以插入被选的段。
⑨	删除段时、 (段01 ~ 99) 按钮中选择后按的话、  (段01 ~ 99) 被选的按钮和  键就可以使用。 按  键、就可以删除段。
⑩	以五个段为单位、画面可以向左侧/右侧移动。
⑪	按  键的话、移动到[图6-1程式设定画面]。

程式 程式組編輯

▶ 組別 1

▶ 開始條件 實際值

溫度(°C) 60.00 60.00 30.00 30.00 60.00

▶ 程式組別設定 [1 - 120] 1

1 2 3 4 5 6 ← BS ESC

7 8 9 0 . +/- CLEAR ENTER

◀ ▶ 插入 刪除

▲ 按“程式號碼”键、显示可设定程式号码的输入键。

程式 程式組編輯

▶ 組別 1

▶ 開始條件 溫度SSP -50.00 °C

溫度(°C) 60.00 60.00 30.00 30.00 60.00

濕度(%) 30.0 30.0 60.0 60.0 30.0

時間(H.M.S) 001.00.00 001.00.00 001.00.00 001.00.00 001.00.00

時間信號 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

等待動作使用 ☐ ☐ ☐ ☐

◀ ▶ 插入 刪除

▲ 开始条件设定为“温度SSP”的画面。

程式 程式組編輯

▶ 組別 1

▶ 開始條件 實際值

實際值

溫度SSP

溫度(°C) 60.00 60.00 30.00 30.00 60.00

濕度(%) 30.0 30.0 60.0 60.0 30.0

時間(H.M.S) 001.00.00 001.00.00 001.00.00 001.00.00 001.00.00

時間信號 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

等待動作使用 ☐ ☐ ☐ ☐

◀ ▶ 插入 刪除

▲ 按“开始条件”键、显示可设定开始条件的输入键。

程式 程式組編輯

▶ 組別 1

▶ 開始條件 濕度SSP 0.0 %

溫度(°C) 60.00 60.00 30.00 30.00 60.00

濕度(%) 30.0 30.0 60.0 60.0 30.0

時間(H.M.S) 001.00.00 001.00.00 001.00.00 001.00.00 001.00.00

時間信號 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

等待動作使用 ☐ ☐ ☐ ☐

◀ ▶ 插入 刪除

▲ 开始条件设定为“湿度SSP”的画面。

程式		程式組編輯				
▶ 組別		▶ 開始條件				
1		實際值 ▼				
段次編號	段次01	段次02	段次03	段次04	段次05	
溫度(℃)	60.00	60.00	30.00	30.00	60.00	
濕度(%)	30.0	30.0	60.0	60.0	30.0	
時間(H.M.S)	001.00.00	001.00.00	001.00.00	001.00.00	001.00.00	
時間信號	00 00 00.00	00 00 00.00	00 00 00.00	00 00 00.00	00 00 00.00	
等待動作使用		☐	☐	☐	☐	
◀ ▶		插入			刪除	

▲ 按 **段次01** 鍵显示为活性化的话 **插入**、**刪除** 键也会显示为活性化。

程式		程式組編輯				
▶ 組別		▶ 開始條件				
1		實際值 ▼				
段次編號	段次01	段次02	段次03	段次04	段次05	
溫度(℃)	60.00	60.00	30.00	30.00	60.00	
▶ 第01段次溫度設定值 [-50.00 ~ 150.00]						60.00
1	2	3	4	5	6	← BS
7	8	9	0	.	+/-	ESC
						CLEAR
						ENTER
◀ ▶		插入			刪除	

▲ 按 **60.00** (溫度) 键、显示可设定设定值的输入键。

程式		程式組編輯				
▶ 組別		▶ 開始條件				
1		實際值 ▼				
段次編號	段次01	段次02	段次03	段次04	段次05	
溫度(℃)	60.00	60.00	30.00	30.00	60.00	
▶ 第01段次溫度設定值 [0.0 ~ 100.0]						30.0
1	2	3	4	5	6	← BS
7	8	9	0	.	+/-	ESC
						CLEAR
						ENTER
◀ ▶		插入			刪除	

▲ 按 **30.0** (濕度) 键、显示可设定设定值的输入键。

程式		程式組編輯				
▶ 組別		▶ 開始條件				
1		實際值 ▼				
段次編號	段次01	段次02	段次03	段次04	段次05	
溫度(℃)	60.00	60.00	30.00	30.00	60.00	
▶ 第01段次運行時間 [000.00.00 ~ 999.59.59]						001H 00M 00S
1	2	3	4	5	6	← BS
7	8	9	0	.	+/-	ESC
						CLEAR
						ENTER
◀ ▶		插入			刪除	

▲ 按 **001.00.00** (時間) 键、显示可设定段时间的输入键。

程式組編輯

組別: 1

開始條件: 實際值

溫度(°C): 60.00, 60.00, 30.00, 30.00, 60.00

段次編號: 段次01, 段次02, 段次03, 段次04, 段次05

第01段次時間信號: 00 00 00 00

0 ~ 17

1 2 3 4 5 6 CLEAR ESC

7 8 9 0 TS1 TS2 TS3 TS4 ENTER

插入 刪除

▲ 按 [00.00.00.00](時間信號)鍵、顯示可設定時間信號的輸入鍵。

参考事項

- ▶ 輸入時間信號及段警報時、按 **ENTER** 鍵輸入。
- ▶ 要離開輸入畫面、請選擇 **ESC** 鍵。
- ▶ [7-4時間信號動作]中設定的數值、可以按 TS1 ~ TS4鍵、輸入需要的時間信號組合。

参数	設定范围	单位	初始值
程式号码	1~120	ABS	1
开始条件	当前PV、温度SSP、湿度SSP	ABS	實際值
段 #n 温度SP	T. EU (0.00~100.00%)	T. EU	T. EU (0.00%)
段 #n 湿度SP	H. EU (0.0~100.0%)	H. EU	H. EU (0.0%)
段 #n 时间	-00.00.01 (OFF) ~ 999.59.59 (时.分.秒)	ABS	-00.00.01
段 #n 时间信号1 ~ 4	0 ~ 17	ABS	0
段 #n 等待动作使用	未使用、使用	ABS	未使用

※ #n:1~99

7-2. 程式循环设定

- 是设定被设定的程式的全部或部分循环功能的画面。
- 可以设定程式运行结束时的动作方法。

[图7-3]程式及段循环设定画面

- ① 设定要执行循环运行的程式号码。
- ② 设定被设定的程式循环运行的次数。
- ③ 结束被设定的程式的运行时、设定连续运行的程式号码。
- ④ 设定被设定的程式中开始部分循环运行的段。
- ⑤ 设定被设定的程式中结束部分循环运行的段。
- ⑥ 设定被设定的程式中部分循环运行的循环次数。
表示被设定的程式的实验名称。
- ⑦
 - 实验名称可以在[7-6实验名称设定]中变更。
 - 是只读文件、不能变更。
- ⑧ 被设定的程式运行结束时、设定运行种类。
 - 程式停止：产生程式结束信号、运行状态为程式停止。
 - 段维持：按最后运行设定值运行、维持维持状态。
 - 连接运行：运行连接程式中设定的程式。

参数	设定范围	单位	初始值
程式号码	1~120	ABS	1
循环次数	0(无限循环)~999	ABS	1
连接程式	1~120	ABS	1
程式组終了模式	程式停止、段维持、连续运行	ABS	程式停止
循环设定1 ~ 4的开始段	0~99	ABS	0
循环设定 1 ~ 4的结束段	0~99	ABS	0
循环设定 1 ~ 4的循环次数	0~99	ABS	0

7-3. 文件编辑

- 在[7-1程序程式设定]中，可以将输入到程式的段值，复制到其他程式或可删除的画面。
- 不能删除运行中的程式号码。
- 不能复原已被删除的程式。

[图7-4] 文件编辑画面

程式 檔案編輯

1 拷貝來源
組別 0

2 拷貝目標
開始組 0
未組 0

3 組刪除
開始組 0
未組 0

已用的檔案訊息
4 已使用的組數 1/120
5 已使用的段數 5/1200

6 複製 7 選擇刪除 8 全部刪除

- | | |
|---|---|
| ① | 设定要复制的原件程式的号码。 |
| ② | 设定复制对象的开始和结束程式的号码。 <ul style="list-style-type: none">• 结束程式为“0”时、只复制开始程式。 |
| ③ | 设定要删除的开始和结束程式的号码。 <ul style="list-style-type: none">• 结束程式为“0”时、只复制开始程式。 |
| ④ | 表示[7-1程序程式设定]中设定的总程式数。 <ul style="list-style-type: none">• 是只读文件、不能变更。 |
| ⑤ | 显示[7-1程序程式设定]中设定的总段数。 <ul style="list-style-type: none">• 是只读文件、不能变更。 |
| ⑥ | 把①设定的程式复制到②设定的程式。 |
| ⑦ | 初始化③设定的程式的设定值。 |
| ⑧ | 初始化所有程式的设定值。 |

程式	檔案編輯	
▶ 拷貝來源 組別 0	▶ 拷貝目標	
	開始組 0	
	未組 0	
▶ 已用的檔案訊息	▶ 組刪除	
已使用的組數 1/120	開始組 0	
已使用的段數 5/1200	未組 0	
複製	參數設定錯誤	選擇刪除 全部刪除

[图7-5] 文件编辑画面#1

参考事項

- ▶ 程式号码输入错误时，进行复制及删除的话，画面下端就会显示“参数设定错误”的消息。

程式	檔案編輯	
▶ 拷貝來源 組別 5	▶ 拷貝目標	
	開始組 0	
	未組 0	
▶ 已用的檔案訊息	▶ 組刪除	
已使用的組數 1/120	開始組 0	
已使用的段數 5/1200	未組 0	
複製	所選擇程式組是空的	選擇刪除 全部刪除

[图7-6] 文件编辑画面#2

参考事項

- ▶ 程式号码里没有保存的内容时，进行复制及删除的话，画面下端就会显示“所选择程式组是空的”的消息。

参数		设定范围	单位	初始值
程式号码		1~120	ABS	0
复制	开始程式	0~120	ABS	0
	结束程式	0~120	ABS	0
复制		未使用、使用	ABS	未使用
选择删除	开始程式	0~120	ABS	0
	结束程式	0~120	ABS	0
全部删除		未使用、使用	ABS	未使用

消息显示	说明
“所选择程式组是空的”	程式号码中没有保存的内容，却进行复制时显示。
“所选程式复制完成”	所选的程式复制完成时显示。
“所选程式已删除完毕”	所选的程式删除完毕时显示。
“所有程式已删除完毕”	所有程式删除完毕时显示。
“要复制的程式正在使用中”	程式正在使用时显示。

7-4. 时间信号动作

- 时间信号动作区分于ON/OFF动作、时间设定动作、这里设定的时间信号使用于[7-1程序程式设定]的段设定里的时间信号号码(NO.)的设定。

(1) 时间信号 ON/OFF 动作



- ① 选择“0”时，在相应的段运行时间里，时间信号是OFF动作。
 - 是只读文件、不能变更。
- ② 选择“1”时，在相应的段运行时间里，时间信号是ON动作。
 - 是只读文件、不能变更。
- ③ 以6个时间信号为单位、上/下移动画面。

(2) 时间信号时间设定动作

- 时间信号2 ~ 17 (TS2 ~ 17) 根据延迟时间和动作时间来运行。

[图7-8] 时间信号设定#2

参数	设定范围	单位	初始值
延迟时间	000.00.00 (OFF) ~ 999.59.59 (时.分.秒)	ABS	000.00.00
动作时间	000.00.00 (OFF) ~ 999.59.59 (时.分.秒)	ABS	000.00.00

①

相应段为始点，经过了延迟时间里设定的时间后，时间信号是“ON”动作。





- 但是，延迟时间比相应段的时间大时，时间信号不运行。

②

在相应的段中，根据延迟时间“ON”动作的时间信号，只在运行时间中设定的时间内“ON”动作。

- 但是，（延迟时间+动作时间）比相应段的时间大时，只在该段运行中时间信号为“ON”，在下一个段里就不运行。

(3) 时间信号输入时动作的案例

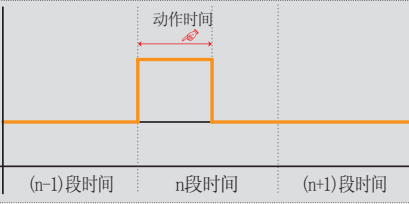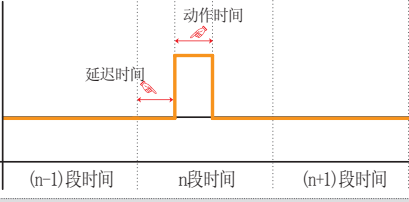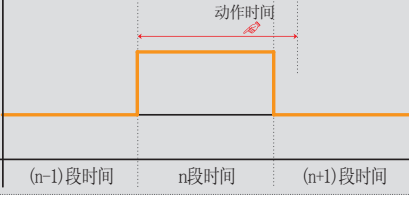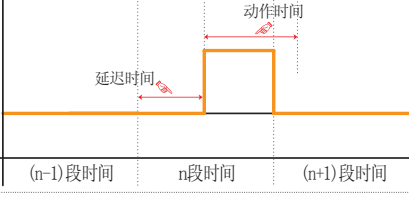设定		时间信号动作		
段 N时间 ≥ 延迟时间 + 动作时间	1. 延迟时间 = 000.00.00	时间信号 ON OFF 段		
	2. 延迟时间 ≠ 000.00.00	时间信号 ON OFF 段		
段 N时间 < 延迟时间 + 动作时间 ☞ 不影响下一个段。	3. 延迟时间 = 000.00.00	时间信号 ON OFF 段		
	4. 延迟时间 ≠ 000.00.00	时间信号 ON OFF 段		

7-5. 等待动作

- 在程序运行中，为了进行等待动作而设定温度・湿度等待范围及时间的画面。
- 这里设定的等待动作适用于[7-1程序程式设定]。
- 等待动作的定义
 - 等待动作进入条件(“OR”条件)：温度和湿度中的任一项在设定的段时间内，没有进入到等待动作设定范围内时。
 - 等待动作解除条件(“AND”条件)：温度和湿度都进入到等待动作设定范围内时、
 - 不设定等待时间(初期值)的话，等待时间为无限值。

[图7-10]等待动作设定画面

程式 等待動作設定畫面

1 等待設定

☒ 不使用 ☐ 使用

5 等待動作模式

☒ 全部 ☐ 段次

▶ 等待範圍

2 溫度範圍 0.00 °C


3 湿度範圍 0.0 %

▶ 等待時間


4 等待時間 00.00 H.M

①	设定等待动作的使用有/无。
②	设定要适用等待动作的温度范围。
③	设定要适用等待动作的湿度范围。
④	温度或者湿度侧指示值(TEMP PV or HUMI PV)不能进入到等待动作范围内时、设定要适用的等待时间。 • 等待动作时间设定为“00.00”时，进入到等待动作范围为止无限等待。
⑤	等待动作方式设定为“全部”或者“维持段”。 • 全部：[7-1程序程式设定]中设定的全部段中适用等待动作。 • 维持段：只有[7-1程序程式设定]中设定的维持区间段适用等待动作。

参数	设定范围	单位	初始值
等待动作设定	未使用, 使用	ABS	未使用
温度等待范围	T. EUS (0.00~100.00%)	T. EUS	T. EUS (0.00%)
湿度等待范围	H. EUS (0.0~100.0%)	H. EUS	H. EUS (0.0%)
等待动作时间	00.00~99.59 (时、分)	ABS	00.00
等待动作方式	全部, 段	ABS	全部

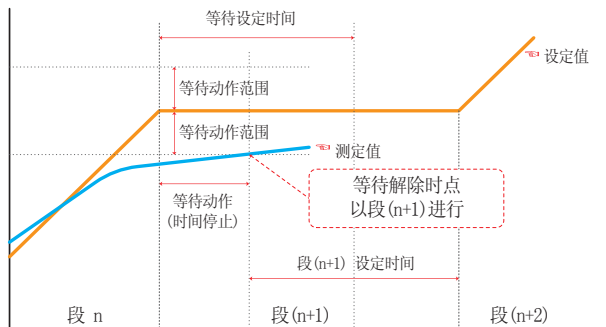

等待时间(WAIT TIME)以内解除等待动作时

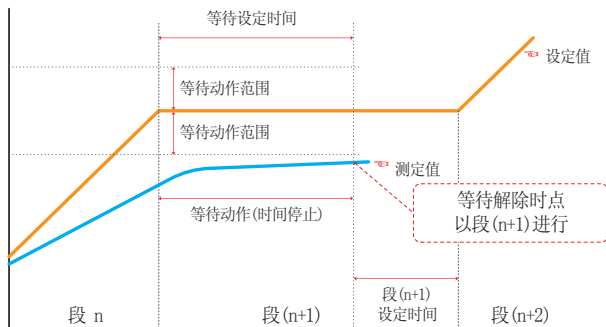等待时间(WAIT TIME)以内、
测定值不能进入等待动作范围时

参考事项

- ▶ 是有关等待动作和等待时间的相互关系的曲线图。
- ▶ 等待动作范围：温度时表示温度等待动作范围、湿度时表示湿度等待动作范围。

7-6. 实验名称设定

- 可以在每个程式上设定实验名称。(请参照[3-2(2)程式运行第1运行画面。])

[图7-11] 实验名称设定画面



- ① 输入各程式的实验名称。
- ② 转换为下一个或者上一个实验名称画面。



[图7-12] 实验名称输入画面



参考事项

- ▶ 按 EXPERIMENT OF PATTERN 1 键、显示可以设定实验名称的输入键。

参数	设定范围	单位	初始值
实验名称 1~120	0~9、A~Z、特殊文字(最多24字)	ABS	EXPERIMENT OF PATTERN 1~ 120

Part 08

画面显示设定

8-1 画面显示设定	69
8-2 查看DI故障历史记录	71



切换

流程图



[图8-1] 画面显示设定画面



[图8-3] D1故障历史记录画面



08. 画面显示设定

8-1. 画面显示设定

- [图2-1主页画面]中按画面显示设定键、转换为[图8-1画面显示设定画面]。



[图8-2] 选择背景基本颜色画面

①	设定运行画面的湿度表示方式。 以下情况时表示湿度指示值(PV)、除此之外表示“---. -”。 • 自动 - 温度侧设定值(SP)在相对湿度表示条件(DRY LIMIT)的范围内时、 - 温度侧指示值(PV)为0.0~100.0℃范围内时、 - 湿度侧设定值(SP) ≠ 0.0%时、 • 手动 - 与自动一样、按温度侧设定值(SP)、指示值(PV)表示湿度、湿度侧设定值(SP) = 0.0% 时也表示湿度。
②	所有画面的背景色分别可用R(0~31)、G(0~31)、B(0~31)值、进行颜色的设定。 • 点击选择基本颜色按钮、可在48种颜色中进行选择。

③	设定蜂音使用有/无。 • 即使设定为未使用，发生DI故障时蜂音会响起。
④	设定背光灯节电时间。 • 节电运行时间是在没有按钮操作时、设定背光灯被OFF的动作时点。
⑤	LCD的亮度利用 、 键调节。
⑥	表示内部存储的总容量及使用容量、可保存的文件总数以及被保存的文件数。 • 警告标示：在运行画面是否使用警告标示(内存容量不足、保存文件超量)、可用 ☐、☒ 键选择。
⑦	从当前画面移动到下一页画面。
⑧	删除内部存储保存的所有文件。

参考事项

- ▶ 内部存储上能保存的文件数限定为256个。超过256个时、请先删除内部存储器里的文件之后使用。

参数	设定范围	单位	初始值
显示湿度	自动、手动	ABS	自动
背景色	R(0~31)、G(0~31)、B(0~31)	ABS	R(21)、G(21)、B(21)
蜂音	未使用、使用	ABS	使用
节电运行时间	0~99 MIN	ABS	10
LED亮度	1 ~ 8	ABS	8个

8-2. 查看DI故障历史记录

- 是表示故障发生的DI种类和日期、时间的画面。
- 故障记录能保存30个，要保存后来发生的记录，得先删除最初保存的记录后进行。




表示发生DI故障时的记录。

- ①
- 表示[安装说明书]的[11-2故障名称]中设定的名称。
 - 是只读文件、不能变更。


② 删除全部的DI故障历史记录。

③ 确认下一个或者上一个故障记录。

参数	设定范围	单位	初始值
全部删除	未使用, 使用	ABS	未使用

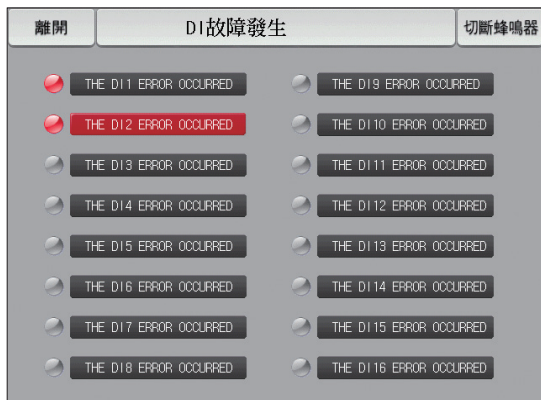

[图8-4] DI错误表示方式为文字的画面

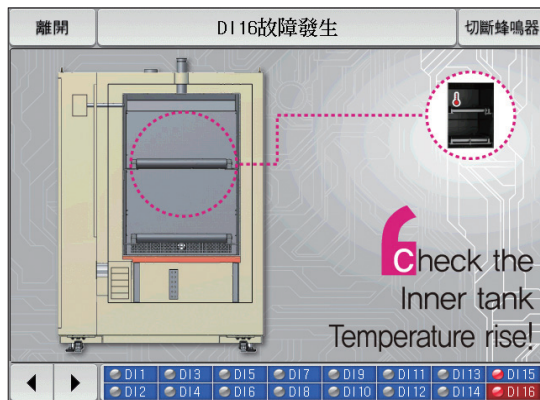

[图8-5] DI错误表示方式为图片的画面

参考事项

- ▶ 是发生DI故障时的画面。
- ▶ 文字及图片画面设定可以在[安装说明书]的[11. DI功能及动作设定]中设定。
- ▶ 按 **離開** 键、离开DI故障画面、转换到运行画面。
- ▶ DI发生后、通过 **離開** 键离开画面、不考虑一分钟之内发生的同样的DI故障。(这里不考虑是指DI故障画面)
- ▶ 例) 发生DI1时，利用“离开”键离开此画面，即使是DI1发生中，也可以忽略一分钟。如果一分钟以后，还是DI1发生状态的话，就会显示DI错误画面。
- ▶ **切斷蜂鳴器** 键是切断DI故障发生时的警报音的按钮。

例) 对于灯的状态的说明


- DI故障未发生 (“OFF” 状态) 
- DI故障发生 (“ON” 状态) 
- DI故障发生后解除 (“ON” 后 “OFF” 状态) 

Part 09


通讯错误74



09. 通讯错误

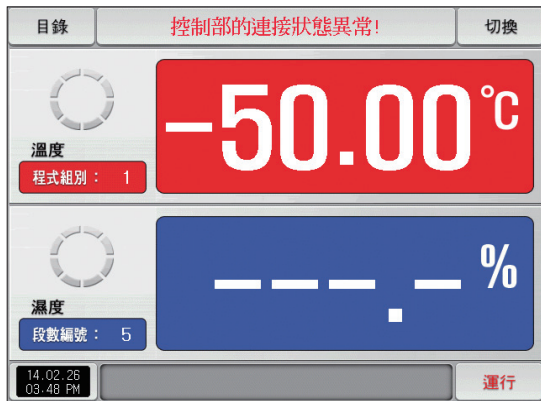

[图9-1]控制部通讯错误画面

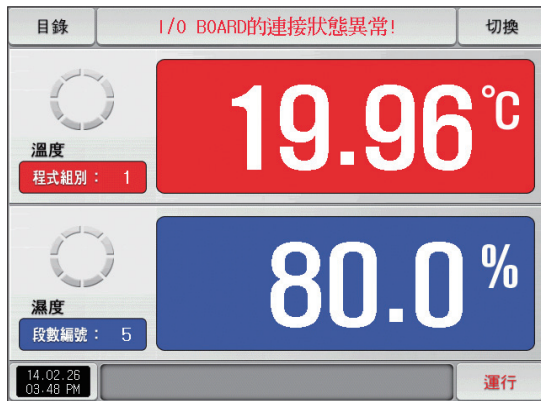


[图9-2] I/O 面板通讯错误画面

参考事项

- ▶ 显示器与控制部之间产生通讯错误时，如[图9-1控制部通讯错误画面]，在画面上端显示“控制部的连接状态异常”的消息。
- ▶ 控制部与I/O面板之间产生通讯错误时，如[图9-2I/O面板通讯错误画面]，在画面上端显示“I/O BOARD的连接状态异常”的消息。
- ▶ 通讯障碍现象:通讯电缆故障、通讯电缆连接状态问题

工学单位(ENGINEERING UNITS) - EU、EUS

- ⚠ 若变更感应种类(IN-T)或输入范围的上限、下限值(INRH、INRL)、表示为EU()、EUS()的参数就会根据现有DATA比例而变更。
(但范围上限、下限设定值被初始化。)
- ⚠ 使用说明书及通讯说明书请在网页上下载。
- ⚠ EU() : 根据仪器(INSTRUMENT)范围(RANGE)的工学单位(ENGINEERING UNIT)值(VALUE)
- ⚠ EUS() : 根据仪器(INSTRUMENT)全范围(SPAN)的工学单位(ENGINEERING UNIT)范围(RANGE)

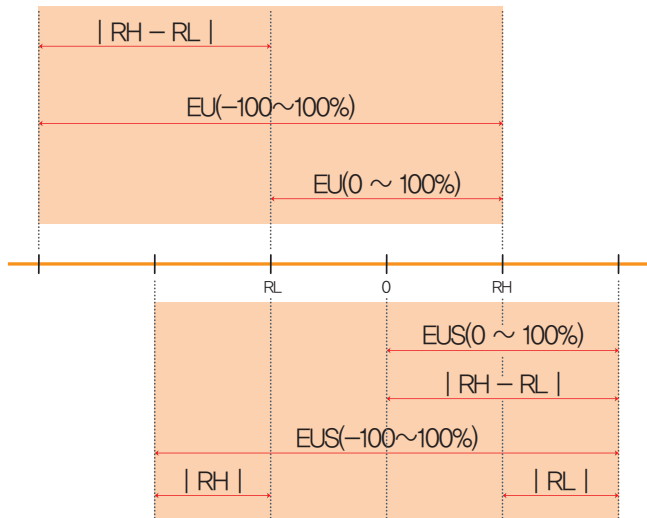

RL: 输入范围下限值
RH: 输入范围上限值

► EU(), EUS() 的范围

	范围	中心点
EU(0 ~ 100%)	RL ~ RH	$ RH - RL /2 + RL$
EU(-100 ~ 100%)	$-(RH - RL + RL) \sim RH$	RL
EUS(0 ~ 100%)	$0 \sim RH - RL $	$ RH - RL /2$
EUS(-100 ~ 100%)	$- RH - RL \sim RH - RL $	0

(例)

► INPUT = PT_1

► RANGE = -90.00°C (RL) ~ 200.00°C (RH)

	范围	中心点
EU(0 ~ 100%)	- 90.00 ~ 200.00°C	55.00°C
EU(-100 ~ 100%)	- 380.00 ~ 200.00°C	- 90.00°C
EUS(0 ~ 100%)	0 ~ 290.00°C	145.00°C
EUS(-100 ~ 100%)	- 290.00 ~ 290.00°C	0.00°C